


Funkcionális jellemzők

A grafén fűtés elvén működő gépek három hőmérsékletet, 50°C-os napi melegítési palotát, 55°C-os második fokozatot, három fokozatot, 60°C-os menstruációs zavart és rezgést is biztosítanak.

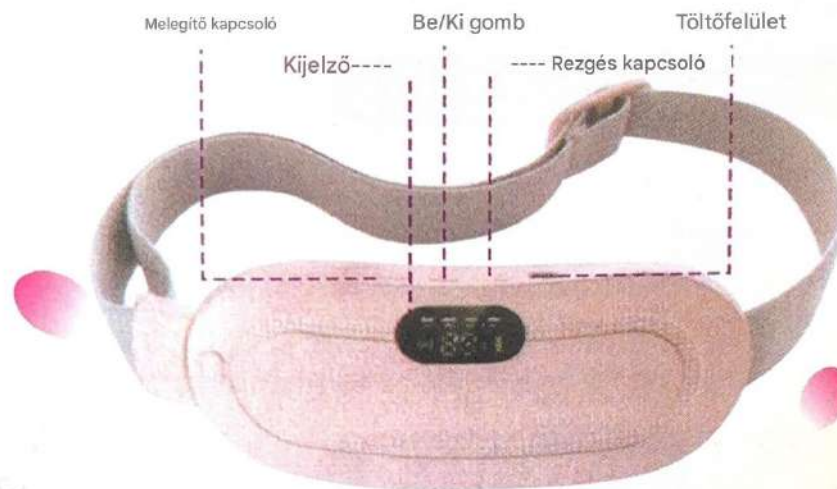

A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot. A melegítő kapcsoló rövid megnyomásával válassza ki a 50°C/55°C/60°C/STOP (122°F/131°F/140°F/STOP) hőmérsékletet; a rezgés kapcsoló rövid megnyomásával válassza ki a rezgési módot:

M1/M2/M3/M4.

FIGYELMEZTETÉS

1. Terhes nők és méhnyakrákos betegek számára fogyatékkal élők számára.
2. Köszvényes vagy még nem teljesen gyógyult köszvény esetén tilos a használata.
3. Gravitációs betegségben és szívbetegségben szenvedők számára tilos a használata.
4. A még be nem gyógyult bőrszemb vagy bőrelváltozásokkal küzdő betegek számára tilos a használata

Termékparaméterek

Név: intelligens fényerőszabályzó öv palota	Szín: fehér/rózsaszín
Méret: 185*85*25 mm	Töltési módok: USB-kábel
Használati terület: / derék- és has	Anyag: ABS + szarvasbársony szövet
Melegítési hőmérséklet: 50/55/60 °C	Töltési feszültség: 5 V

Biztonsági utasítások

1. NE használja alvás közben.
2. Kérjük, kerülje a melegítőpárna hosszú távú, ugyanazon a pozícióban történő használatát a testén, és figyeljen bőre állapotára. Ha bármilyen rendellenességet észlel a bőrén, azonnal vegye le a melegítőpárnát.
3. NE vigye a melegítőpárnát tűz közelébe, és ne használjon semmilyen maró folyadékot.

A TERMÉKRŐL

1. Ez a melegítőpárna a legújabb, továbbfejlesztett grafén technológiát alkalmazza. Gyorsan felmelegedő, hordozható, vezeték nélküli fűtőpárna, mindössze 5 másodperc alatt felmelegszik és megemeli a hőmérsékletet. Segít enyhíteni a menstruációs görcsöket/hasi/has- és hátfájást
2. Az elektromos, hordozható, vezeték nélküli fűtőpárna 4 rezgési móddal és 3 fűtési szinttel rendelkezik. Egyszerre is bekapcsolható. Lehetővé teszi a beállítás testreszabását a maximális kényelem érdekében. Három kapcsolható hőmérséklet: 50°C, 55°C és 60°C.
3. A hordozható fűtőpárna úgy van kialakítva, hogy automatikusan kikapcsoljon. Ha használat közben elalszik, a termék 30 percen belül automatikusan kikapcsol, miután érzékeli, hogy nem végzett mozgást, ami garantálja az Ön biztonságát. Ha újra használni szeretné, csak kapcsolja be újra.

Értékesítés utáni szolgáltatás

Címzett neve	
Címzett címe	
Karbantartási okok	
A termék neve	
Elérhetőség telefonszáma	
Elérhetőség telefonszáma	

1. Ha a termékkel munkanapokon belül minőségi probléma merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és a lehető leghamarabb megoldjuk a problémát.
2. Ha a termék minőségi problémák miatt nem használható, egy év ingyenes karbantartási szolgáltatást biztosítunk
3. Nem fogadunk el leveleket fizetésre. A postaköltség megoldása érdekében szakosodott értékesítés utáni szolgáltatásunkkal felvesszük Önnel a kapcsolatot.
4. Kérjük, tölts ki az értékesítés utáni szolgáltatás garanciajegyét a visszaküldött árukkal és tartozékokkal együtt, hogy a lehető leghamarabb foglalkozhassunk vele